

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

## GUIDE-PATIENT

### Utilisation du tube d'alimentation GASTROJÉJUNOSTOMIE



Type profil bas (MIC-KEY)

Ce guide vous aidera à comprendre les soins de votre tube.  
Lisez-le avec votre famille.

Québec 


© Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, 2019  
Direction des soins infirmiers



## Présentation de l'appareil : Gastrojéjunostomie de type profil bas MIC-KEY

Le tube d'alimentation de type gastrojéjunostomie permet l'alimentation via le jéjunum via le port d'alimentation.


Un ballonnet est présent dans la cavité de l'estomac afin de retenir le tube en place. Le port du ballonnet permet de gonfler et de dégonfler le ballonnet et est identifié avec les lettres "BAL".

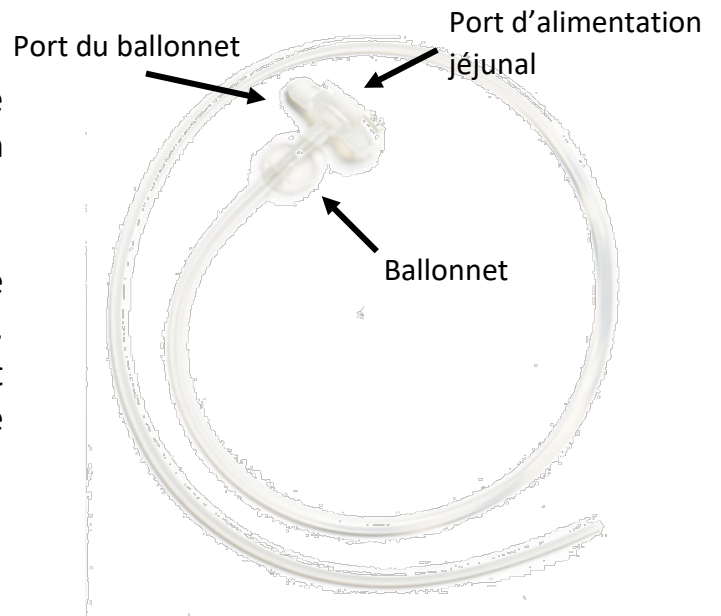


## Administration de l'alimentation et de la médication

- ❖ Vous devez utiliser les tubulures d'alimentation spécifiques à votre tube MIC-KEY (deux modèles : continu #0121-12 ou bolus #0123-12).


### Modèle pour bolus (#0123-12) :

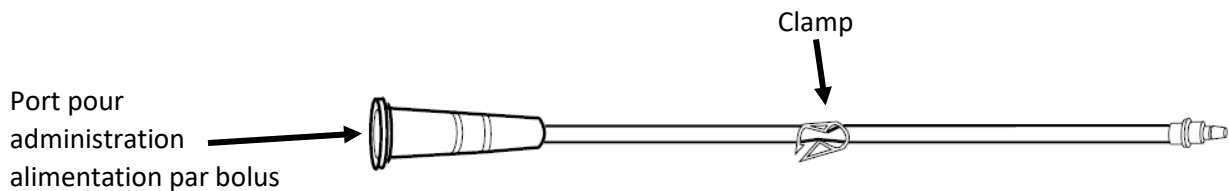

### Modèle pour administration en continu (#0121-12) :

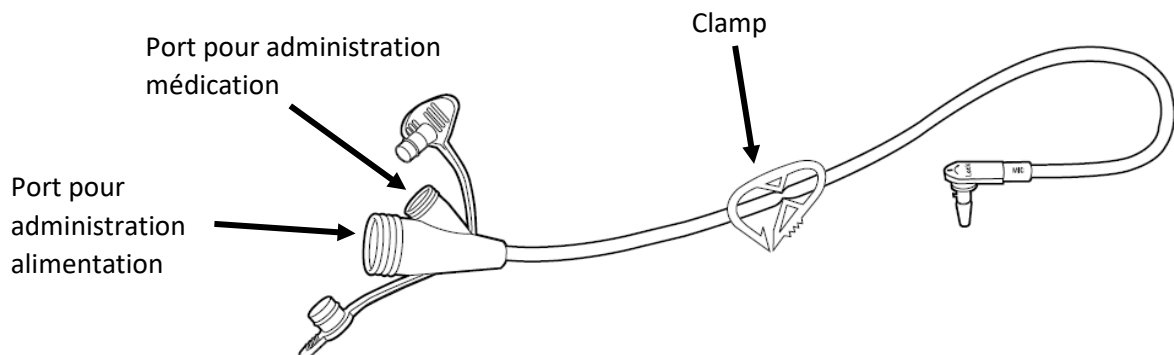

- ❖ Attacher la tubulure d'alimentation en alignant les lignes noires sur le connecteur de la tubulure ainsi que celle sur le port d'alimentation de votre tube MIC-KEY et faire la rotation dans le sens indiqué par la flèche pour le maintenir en place (ne pas forcer). Faites l'inverse pour détacher la tubulure lorsque vous voulez la retirer (quand vous ne l'utilisez pas).
- ❖ Nettoyez bien vos tubulures à l'eau savonneuse chaque jour et rincez-les à l'eau tiède; suspendez-les pour sécher. Vous pourrez garder vos tubulures jusqu'à 4 semaines avant de les changer si vous les nettoyez correctement.
- ❖ **NE PAS** utiliser le tube pour l'administration d'alimentation faite maison (ex : soupes, bouillis, compotes). Cette action risque de bloquer le tube.
- ❖ En présence de vomissements, cessez l'alimentation et avisez immédiatement votre équipe médicale. Cela peut signifier un déplacement du tube.
  - ❖ Demandez vos médicaments au pharmacien sous forme liquide, si possible. Sinon, assurez-vous de bien les broyer ou les dissoudre avec de l'eau du robinet afin d'éviter de bloquer votre tube. Administrez vos médicaments un à la fois. **Attention :** vérifiez avant avec votre pharmacien que tous vos médicaments puissent être broyés. Aucun comprimé non broyé ne doit être administré dans la tubulure ou le tube MIC-KEY.

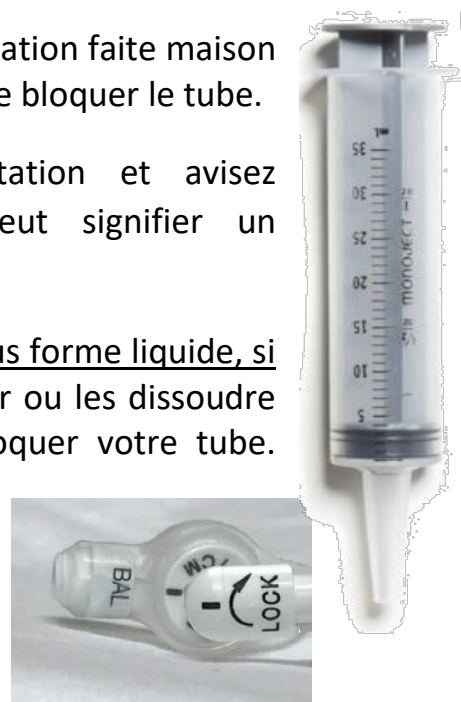


## Soins du tube d'alimentation de gastrojéjunostomie

- ❖ Rincez régulièrement le port d'alimentation jéjunal

**Quand :** avant et après l'administration de l'alimentation ou de la médication. Lorsque l'alimentation est administrée de façon continue, le tube doit être rincé aux 4 heures.

**Comment :** en connectant la seringue à la tubulure. Vous devez utiliser une tubulure d'alimentation spécifique à votre tube MIC-KEY. Pour un adulte, un rinçage avec 20 à 30 millilitres d'eau est recommandé si vous n'avez pas de restriction de liquide (selon les indications de votre professionnel de la santé). Utilisez de l'eau bouillie pendant 20 minutes puis refroidie. L'eau se conserve à la température de la pièce pendant 24 heures.

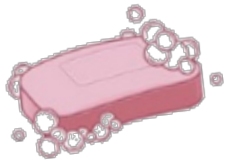


- ❖ Nettoyez bien le port d'alimentation chaque fois que vous l'utilisez. Utilisez un coton-tige avec de l'eau tiède et du savon afin d'éliminer complètement les résidus de solutions d'alimentation ou de médicaments. Bien nettoyer les orifices augmentera la durée de vie de votre MIC-KEY.

- ❖ Chaque semaine, vérifiez le volume d'eau de votre ballonnet Suivez ces étapes :

1. Connectez la seringue *Luer slip* de 10 millilitres au port du ballonnet (seringue illustrée ici)
2. Aspirez l'eau du ballonnet avec la seringue et vérifiez la quantité et la qualité de l'eau. La quantité d'eau devrait être la même que celle prescrite. Si l'eau vous semble trouble, jaunâtre ou présente des résidus, jetez-la et remplacez-la
3. Si la quantité d'eau et la qualité de l'eau sont bonnes, réinjectez l'eau dans le ballonnet et déconnectez la seringue
4. Au besoin, ajoutez ou remplacez avec de l'eau du robinet (jamais d'air ou d'eau salée (NaCl)) par le port du ballonnet. Ne jamais dépasser 10 millilitres afin de ne pas abîmer le ballonnet.



- ❖ Votre MIC-KEY ne doit pas être trop serré à la peau. Il devrait y avoir environ 3mm, soit l'épaisseur d'une pièce de monnaie, entre la base du tube et la peau de votre ventre. Si vous prenez ou perdez du poids, il est possible que le tube doive être changé pour qu'il soit bien ajusté.

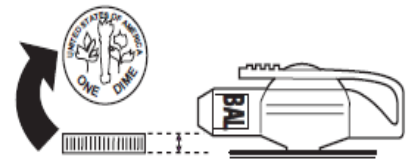

- ❖ **NE PAS tourner le tube de gastrojéjunostomie.** Cette action peut entraîner un déplacement du tube.

- ❖ La durée de vie moyenne d'un MIC-KEY est d'environ 6 à 8 mois. **Assurez-vous d'avoir un autre tube Mic-Key en cas de complications.** Les urgences n'en possèdent généralement pas. Un remplacement de votre tube peut être nécessaire si :


- Votre stomie est inconfortable ou présente des signes d'irritation
- Perte ou gain de poids significatif

- ❖ En cas de retrait accidentel de la stomie, contactez **immédiatement** un professionnel de la santé.

## Soins de votre stomie

---

- ❖ À tous les jours, nettoyez la peau au site de votre stomie. Pour ce faire, nettoyez le pourtour de la stomie avec un coton-tige et de l'eau savonneuse tiède. Bien assécher par la suite.
- ❖ Ne pas mettre de compresse entre votre MIC-KEY et la peau. Il n'est pas nécessaire d'avoir de pansement non plus afin de diminuer l'humidité (à moins de consignes spécifiques de votre infirmière ou votre médecin).
- ❖ Si des fuites sont présentes par l'orifice de la stomie, il se peut que le ballonnet ne soit pas suffisamment gonflé. Vérifiez la quantité d'eau dans le ballonnet tel que décrit précédemment.
- ❖ Avisez votre professionnel de la santé rapidement (811, CLSC, Soins à domicile, etc.) si votre peau au site de la stomie est douloureuse, présente un bourgeon rougeâtre, présente de la rougeur ou s'il y a toujours du liquide qui coule de votre stomie.

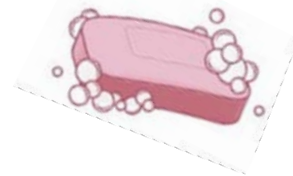

## Aide

---

En présence de retrait accidentel ou de complications avec votre stomie, veuillez soit :

- appeler au 811 pour obtenir des directives;
- appeler votre infirmière du soutien à domicile;
- prendre rendez-vous au CLSC.



### **SUGGESTIONS DE FOURNISSEURS (pas exclusif) :**

#### ❖ **CENTRE DE STOMIE PREMIER**

(Livraison gratuite au Québec avec achat minimum de 75 \$)

Téléphone : 514 940-9666 ou 1 877 809-8277

Adresse : 6607, Côte des Neiges, Montréal (Qc) H3S 2A3

Site Internet : [www.premierostomy.com](http://www.premierostomy.com)

Courriel : [info@premierostomy.com](mailto:info@premierostomy.com)

#### ❖ **CALEA**

(Livraison gratuite au Québec avec achat minimum de 100 \$)

Téléphone : 514 335-3500

Adresse : 4929, Place Olivia, Saint-Laurent, Montréal (Qc) H4R 2V6

Site Internet : <http://www.calea.ca/en/>

Courriel : [tqn-enterale@calea.ca](mailto:tqn-enterale@calea.ca)



## Matériel nécessaire aux soins

---

### Code des tubulures d'alimentation :

Continu avec angle droit : **0121-12**

Bolus : **0123-12**



Seringue d'alimentation  
(35 à 60 mL)

Seringue Luer-slip (10 mL)  
pour vérifier la quantité d'eau  
du ballonnet

Si les produits ne sont pas couverts par votre assurance privée, vous pouvez vous renseigner sur le **Programme ministériel d'alimentation entérale (PMAE)**, repéré à :

<https://www.chusj.org/fr/soins-services/A/Alimentation-enterale>

**Hôpital de la Cité-de-la-Santé**

1755, boulevard René-Laennec

Laval (Québec) H7M 3L9

Téléphone : 450 668-1010

[www.lavalensante.com](http://www.lavalensante.com)

Direction des soins infirmiers

Octobre 2019

NIV : 62-100-334

*Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
de Laval*

Québec 